

Установка нового принтера или смена типа принтера в программе RT-7600 версия 4.2 WinXP FBWP

В версии программы 3.8 и новее применяется операционная система Windows XP Embedded с активированным фильтром FBWP. Данный фильтр не позволяет изменять или перезаписывать системные или любые другие файлы на диске C:, исключением является папка "[C:\RTNemat](#)". Для выполнения любых изменений в системе (включая установку новых драйверов) необходимо сначала отключить фильтр FBWP. Для отключения фильтра следует выполнить ниже описанную процедуру:

- 1) Включить анализатор и после полной загрузки и проверки зайти в главное меню (см. Рис-1)

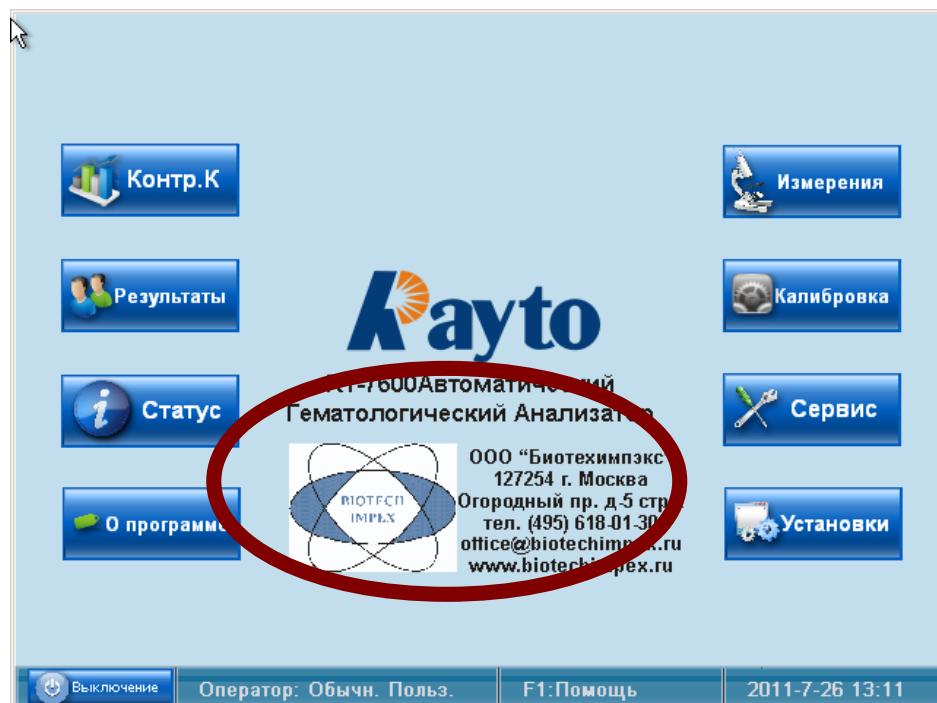


Рис.-1 Главное меню программы.

- 2) Щелкать левой клавишей мыши в зоне, обозначенной красным в окне главного меню (Рис.-1), до тех пор, пока не откроется скрытое меню (Рис.-2)

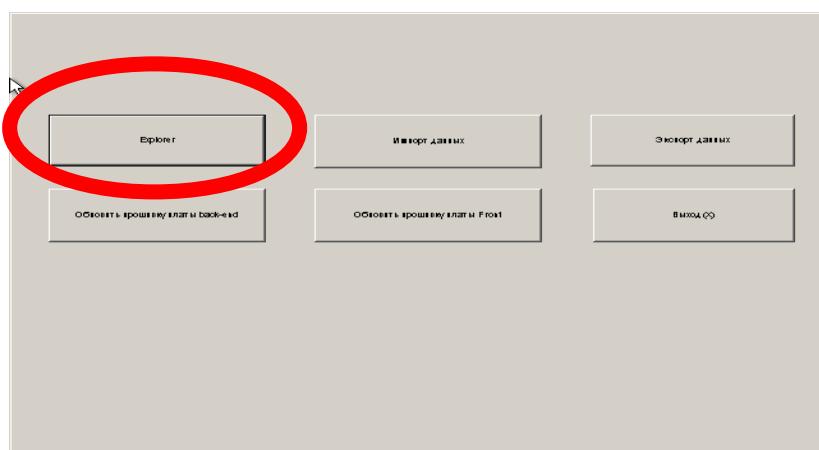


Рис.-2 Скрытое меню.

- 3) Щелкнуть на клавишу "Explorer" (первая слева в верхнем ряду). Откроется проводник Windows.

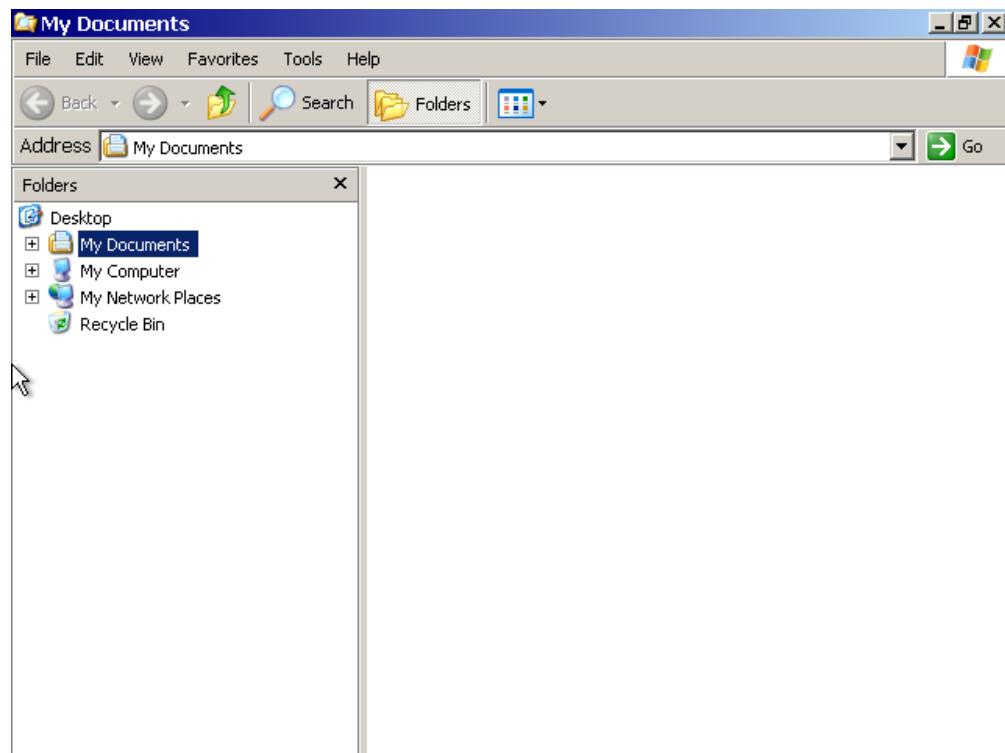


Рис.-3 Окно проводника.

- 4) Открываем диск C: и в корне находим и запускаем файл "FBWF.EXE"

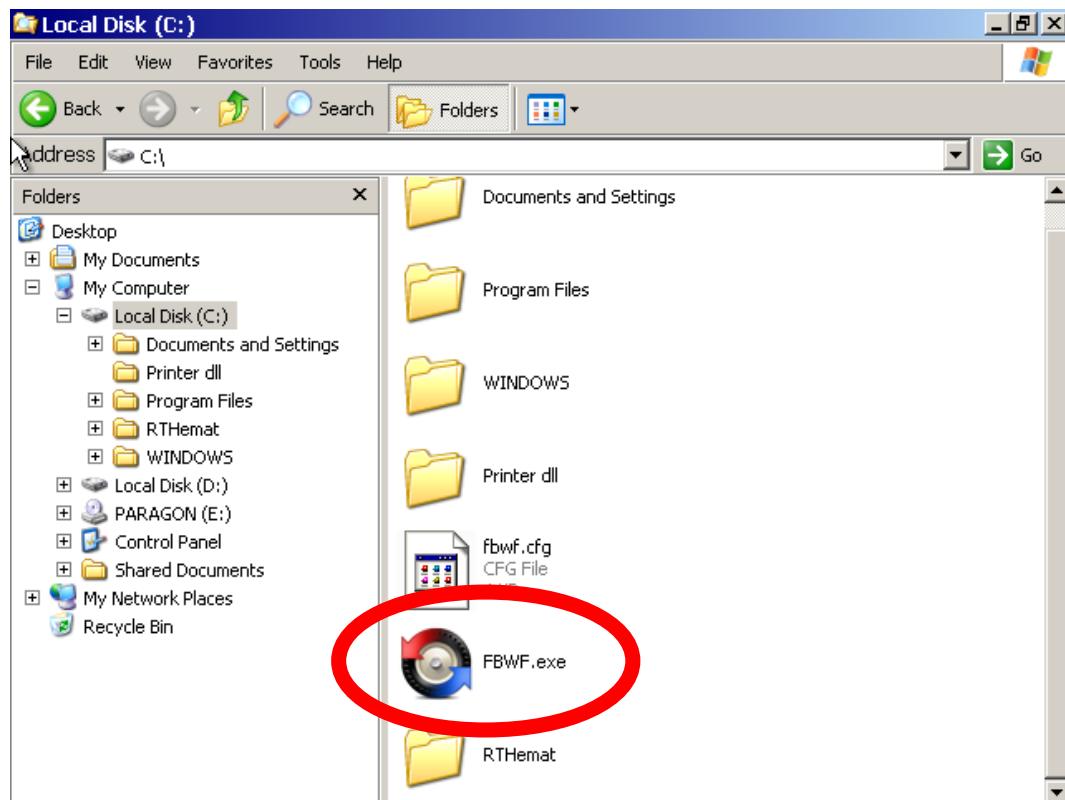


Рис.-4 Файл FBWF.exe

- 5) Отсюда и далее все сообщения и надписи на Китайском (к сожалению). Откроется окно с запросом пароля (Рис.-5)

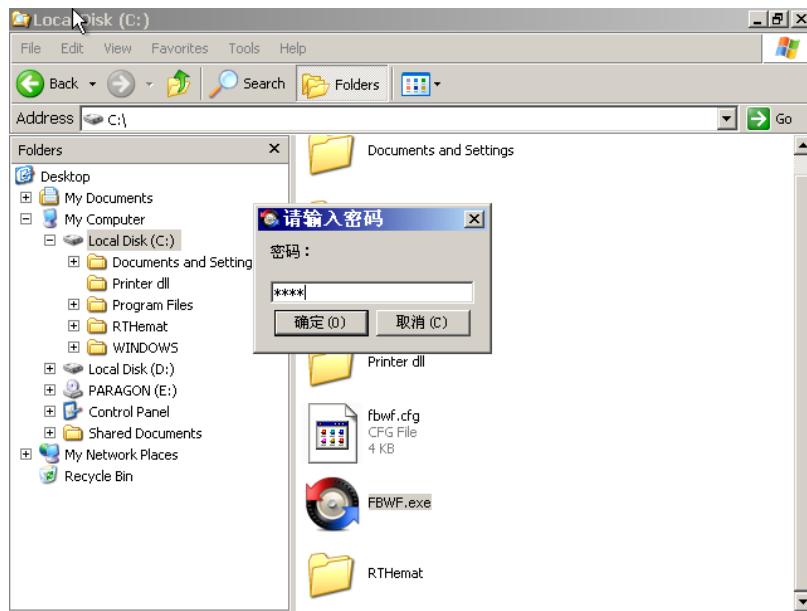


Рис.-5 Запрос пароля

Вводим пароль "1008", жмем на левую клавишу (с буквой "О")

- 6) После правильного ввода пароля откроется следующее окно:



Рис.6 Выключение фильтра

В колонке справа показано текущее состояние фильтра — "Enabled" т.е. включен
 Для отключения фильтра нажмите верхнюю клавишу во втором столбце слева (см. Рис.-6)
 Далее следует перезагрузить систему нажав на крайнюю правую клавишу в самом нижнем ряду
 (см. Рис.-6)
 7) После перезагрузки повторно выполняем все операции с 1) по 6) и убеждаемся, что фильтр
 деактивирован "disabled" (см. Рис.-7)



Рис.-7 Проверка состояния фильтра.

Далее можно производить изменения в системе и в установках (например установить драйвер нового принтера или изменить тип внешнего принтера)

Внимание!!!! После выполнения изменений нужно вновь активировать фильтр FBWP! Для активации выполняем пункты 1-6 и нажимаем первую клавишу в левом столбце. (см. Рис.-7)

Выполняем перезагрузку и проверяем состояние фильтра — должно быть "enabled" (Включен)